



Sans PVC, phtalates, ni latex



Recommandations d'utilisation

La sonde à usage unique LoFric® Sense™ est recommandée pour le sondage urinaire intermittent par l'urètre.

Stérilisation et durée de conservation

Toutes les sondes sont stérilisées par irradiation (R). La date limite d'utilisation est imprimée sur l'emballage.

Conditionnement

Emballage individuel pelable.
Boîte distributrice de 30 sondes.
4 boîtes par carton.

Composition

Revêtement hydrophile:
Polyvinyle Pyrrolidone (PVP).

Sonde: Elastomère à base de polyoléfine (POBE).

Sachet d'eau: Feuille laminée de Polyéthylène Téréphtalate (PET), Polyéthylène (PE) et Aluminium. Eau stérile avec Chlorure de Sodium (sel, NaCl).

Emballage individuel: Feuille laminée de Polyester et d'Oxyde d'Aluminium (PET/Alox), Polyéthylène linéaire à basse densité (LLDPE), feuille d'Aluminium.


La gamme

Référence	Descriptif	Longueur	Code ACL	Taille
416 08 70	LoFric® Sense™	15 cm	3401095938815	CH08
416 10 70	LoFric® Sense™	15 cm	3401095938983	CH10
416 12 70	LoFric® Sense™	15 cm	3401095939065	CH12
416 14 70	LoFric® Sense™	15 cm	3401095939126	CH14


Tarif LPPR (liste des produits et prestations remboursables) 86,93€ T.T.C la boîte, sous la référence 1165186 : 30 sondes en PVC ou polyuréthane ou en POBE avec traitement de surface hydrophile autolubrifiante.




Mode d'emploi

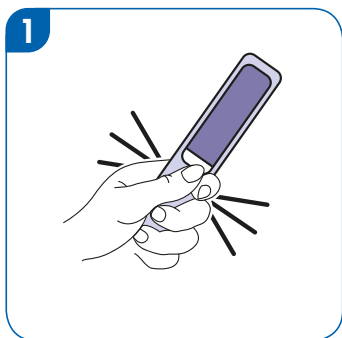


1. Une simple pression et la sonde est prête à l'emploi.

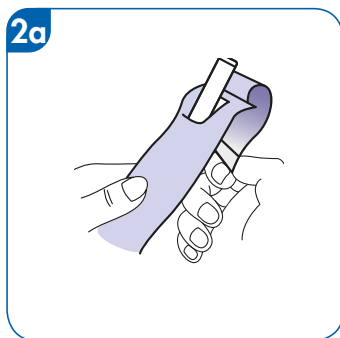

2a. Ouverture pelable.

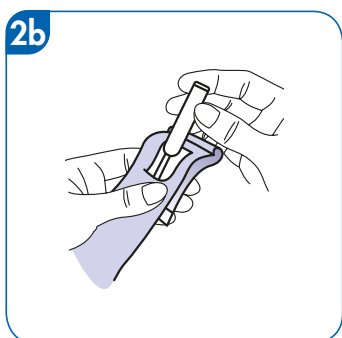

2b. Maintenir le rabat et sortir la sonde.

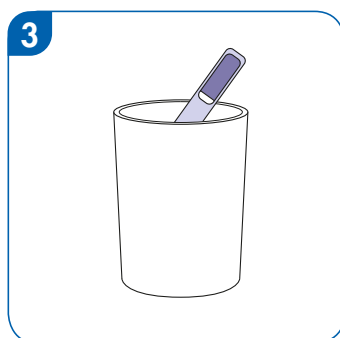

3. Après le sondage, l'emballage permet de jeter la sonde de manière discrète et hygiénique.

INFORMATIONS IMPORTANTES

Ce produit est un dispositif médical de Classe I stérile, à usage unique, fabriqué par Wellspect HealthCare, Mölndal Suède, organisme notifié N°0086. Une fois utilisé, le revêtement sera altéré et la sonde ne sera plus stérile. Utiliser exclusivement la solution (eau, sel) fournie pour humidifier la sonde. Lire attentivement le mode d'emploi.